

3. Semester projekt Dokumentation

Udvikling af et blodtrykmålesystem

Dokumentation

Navn	$\mathbf{AU}\ \mathbf{ID}$	Studienummer
Caroline Kaagaard Dahl Laursen	AU572444	201611025
Nicolai Bæch	AU580049	201704646
Mathias Egsgaard	AU590400	201705031
Thea Plenus Kjeldahl Kristensen	AU577124	201707180
Sarah Krohn Fenger	AU577425	201707931
Mikkel Rugholm Boisen	AU578833	201708119
Kajene Elankanathan	AU594051	201710472

Vejleder: Samuel Alberg Thrysøe

DATO: 19/12-2018

Antal sider: XX

Indholdsfortegnelse

			\mathbf{Side}
${f K}$ apitel	1 In	dledning	3
$\mathbf{Kapitel}$	2 H	ardwaredesign	4
2.1	Strømf	forsyning	. 5
2.2	Forstæ	erker	. 6
	2.2.1	Beregninger	. 6
	2.2.2	Test af forstærker med spændingsdeler	. 6
	2.2.3	Test af forstærker med vandsøjle	. 7
2.3	Subtra	actor	. 8
	2.3.1	Beregninger	. 8
	2.3.2	Test af subtractor	. 9
2.4	Filter		. 11
	2.4.1	Valg af filtertype	. 11
	2.4.2	Beregninger	. 11
	2.4.3	Test af filter	. 11
2.5	Integra	ationstest	. 12
	2.5.1	Test med spændingsdeler	. 12
	2.5.2	Test med vandsøjle	. 12
2.6	Printp	lade	. 13
	2.6.1	Design af printplade	. 13
	2.6.2	Test af printplade	. 15
	2.6.3	EuroCircuits	. 16

1 Indledning

2 Hardwaredesign

2.1 Strømforsyning

Til powersupply valgte vi i starten at det skulle være et USB, som hhv. giver 0 V og 5 V. Det valgte vi ikke at tage med da vi skal have at signalet skal trækkes ned til at gå fra -2,5 til 2,5 V. NI-DAQ 6009'en har en -+ indgang og et stel, og man kan sætte den til at kører i området +- 5 volt, og +- 2,5 volt. Hvis man kører signalet fra 0 til 5 volt og kører signalet ind på USB'et så vil man ikke få en god opløselighed. Man udnytter ikke dynamikken. Der har man 14 bit, og hvis man kun kører + på indgangen svarer det til at man kun kører på 13 bit. For at udnytte hele dynamikken i NI-DAQ 6009'en får man substraktoren ind, og der vil man få +- indgangen til at gå gå fra +- 2,5 V. Analog og substractor bruges derfor på signalet. Analogen bruges til at levere +- forsyning uden en inverter, der giver -5V, og substraktoren vil derved trække signalet ned, sådan at man udnytter hele dynamikområdet på NI-DAQ 6009'en ved at den går fra +- 2,5 V. Signalet skal gå fra +- for at udnytte dynamikken i NI-DAQ 6009'en. Den har en differential indgang, og den skal have en +- indgang. Derfor bruger vi analog for at lade den gå fra -+. Strømforsyningen giver strøm til hhv. transduceren og forstærkeren med -+5 V. Derudover giver strømforsyningen også stelforbindelse til hhv. transducer, forstærker, anti-aliaseringsfilteret og AD-converter.

2.2 Forstærker

Beskrivelse af forstærker

Fra INA114 databladet ses en formel til udregning af komponentværdier for at skabe den ønskede gain. Da vi ønsker en gain på 640 udregnes komponentværdierne til følgende:

2.2.1 Beregninger

$$sensitivity = 5 \cdot \frac{\mu V}{V \cdot mmHg}$$

$$powersupply = 5V$$

$$maximumPressure = 250mmHg$$

$$V_{out} = 5 \cdot \frac{\mu V}{V \cdot mmHg} \cdot 5V \cdot 250mmHg = 6250\mu V$$

$$V_{out} = 6,25mV$$

$$gain = \frac{4V}{V_{out}} = 640$$

$$G = 1 + \frac{50k\Omega}{R_G}$$

$$640 = 1 + \frac{50k\Omega}{R_G} \rightarrow R_G = \frac{5000}{639}$$

$$R_G = 78,247\Omega$$

Med ovenstående beregninger vurderes det, at vi skal bruge en modstand på ca. 78Ω for at forstærke signalet 640 gange.

2.2.2 Test af forstærker med spændingsdeler

For at teste forstærkerens virkning bruges en spændingsdeler til at gøre en spænding fra Analog Discovery mindre. Vi ønsker at teste, om forstærkeren forstærker signalet 640 gange. Komponenterne til spændingsdeleren udregnes til følgende:

Tilfældig modstand vælges

$$R2 = 100k\Omega$$

Tilfældig spænding vælges

$$V1 = 4V$$

Ønsket nedforstærkning

$$V2 = 0,00625V$$

R1 bestemmes:

$$0,00625V = 4V \cdot \frac{R1}{R1 + R2} \rightarrow R1 = 156,4945\Omega$$

${\bf 2.2.3}\quad {\bf Test~af~forstærker~med~vands} \\ \emptyset {\bf jle}$

2.3 Subtractor

Før brugen af subtractoren har vi et signal, der er forstærket op til 4V. Med dette signal bruges indgangen -4V til 4V på AD-Converteren. Ved kun at bruge 0-4V gør det, at vi kommer til at miste én af NI-DAQ 6009's 14 bit. For at forhindre dette bruges en subtractor til at trække signalet ned, så det i stedet for at gå fra 0-4V går fra -2-2V. Dette giver os muligheden for at bruge indgangen -2,5-2,5V på AD-Converteren. Vi kan med dette forhindre, at vi kommer til at miste en bit. Til subtractoren benytter vi operationsforstærkeren OP27GH.

2.3.1 Beregninger

På vores kredsløb for subtractoren kan vi først slukke for v2, så vi får et udtryk for vO1.

$$V_{O1} = -\frac{R2}{R1} \cdot V_1$$

Nu slukker vi for v1 og får dermed et udtryk for vO2.

$$V_{O1} = \left[\frac{R4}{R3 + R4}\right] \cdot \left[\frac{R1 + R2}{R1}\right] \cdot V_2$$

Ved brug af superposition tilføjer vi vores ønskede outputs på vores to kilder

$$V_O = V_{O1} + V_{O2}$$

Vi kan nu indsætte værdierne for V_{O1} og V_{O2} .

$$V_O = -\frac{R2}{R1} \cdot V_1 + \left[\frac{R4}{R3 + R4}\right] \cdot \left[\frac{R1 + R2}{R1}\right] \cdot V_2$$

De fire modstande bestemmes med samme værdier. Værdien vælges til $10 \mathrm{k}\Omega$

$$R1 = 1000k\Omega$$

 $R2 = 1000k\Omega$

 $R3 = 1000k\Omega$

 $R4 = 1000k\Omega$

Dette gør, at de fire modstande divideret med hinanden giver 1.

$$\frac{R3}{R1} = \frac{R4}{R2} = 1$$

Dette kan vi benytte i funktionen for V_O .


$$V_O = V_2 - V_1$$

 V_2 er input i subtractoren og V_1 er spændingen vi ønsker at nedjustere vores signal med.


$$V_O = 4V - 2V = 2V$$

2.3.2 Test af subtractor


Til at teste subtractoren på fumlebræt bruges waveforms til at generere to signaler - et DC signal med 2V, der her fungerer som subtractorens V_1 samt et sinus signal. Signaler med henholdsvis 2V amplitude og offset 2V til at vise 0-4V og et med amplitude 2V og offset 3V til at vise 1-5V. På figurerne neden for ses det, at subtractoren trækker begge signaler ned med 2V, så det første signal viser -2-2V og det andet signal viser -1-3V.

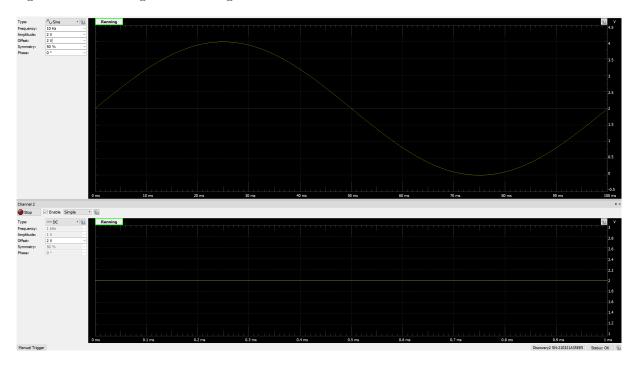


Figur 2.1. Test af subtractor - offset 2V

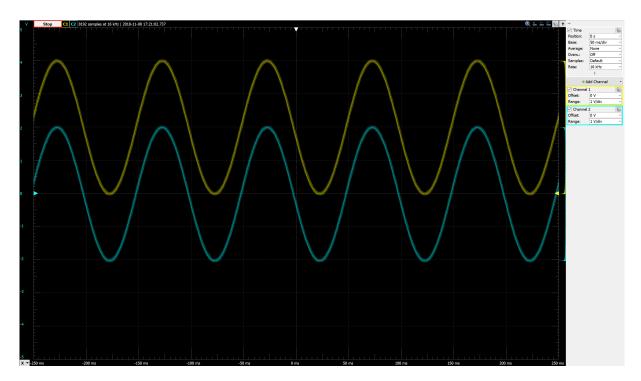

Figur 2.2. Test af subtractor - offset 2V

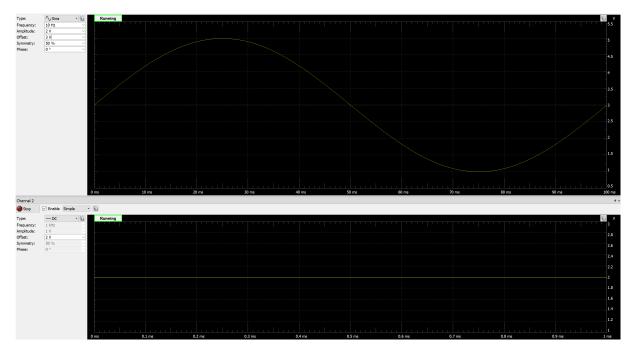

 ${\it Figur~2.3.}$ Test af subtractor - offset 3V

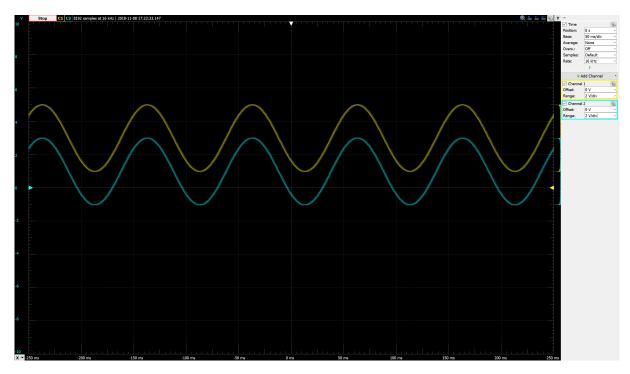

 $Figur\ 2.4.$ Test af subtractor - offset 3V

- 2.4 Filter
- 2.4.1 Valg af filtertype
- 2.4.2 Beregninger
- 2.4.3 Test af filter

Test af filter

Frekvens (Hz)	Amplitude (V)	Offset	Amplitude (V)	dB
, ,	Input		Output	(20*log(Vout/Vin)
10	2	0	2	0
30	2	0	1,905	-0,422700313
40	2	0	1,7164	-1,328229796
50	2	0	1,4416	-2,843704441
60	2	0	1,1668	-4,680671504
70	2	0	0,9577	-6,396010165
80	2	0	0,7546	-8,466263896
90	2	0	0,6172	-10,21208157
100	2	0	0,5037	-11,9771609
110	2	0	0,432	-13,31092498
120	2	0	0,3603	-14,88731467
130	2	0	0,3066	-16,2891569
140	2	0	0,2707	-17,3708348
150	2	0	0,2286	-18,83907539
170	2	0	0,1772	-21,05132556
190	2	0	0,1438	-22,86542219
210	2	0	0,1163	-24,70900562
250	2	0	0,084	-27,53501419
290	2	0	0,0613	-30,27139042
330	2	0	0,0467	-32,6342623
370	2	0	0,0374	-34,56316787
410	2	0	0,0299	-36,50717615
450	2	0	0,0247	-38,16666085
500	2	0	0,0201	-39,95667876


- 2.5 Integrationstest
- 2.5.1 Test med spændingsdeler
- 2.5.2 Test med vandsøjle

2.6 Printplade

2.6.1 Design af printplade

For at kunne designe et printudlæg skal kredsløbet realiseres i Multisim. Kredsløbet opbygges derfor med de beregnede komponentværdier til henholdsvis forstærker, subtractor og filter. Når kredsløbet er realiseret i multisim kan diagrammet overføres til Ultiboard hvor printpladen kan opstilles med korrekte forbindelser mellem komponenterne.

2.6.1.1 Multisim

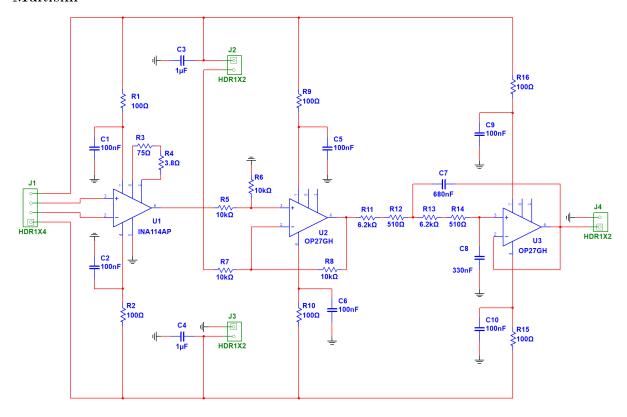


Figur 2.5. Kredsløbets opbygning i Multisim

På figur 2.5 ses kredsløbet opbygget med korrekte komponentværdier. Til venstre i diagrammet ses en header J1, der på den designede printplade skal udgøre de fire forbindelser til tryktransduceren. Øverst ses en header J2, der skal udgøre strømforsyningen - henholdsvis 5V til transducer, forstærker og filter samt en 2V strømforsyning til substractoren. Nederst i diagrammet ses en header J3, der skal udgøre -5V og stelforbindelse. Til højre i diagrammet ses en header J4, der skal bruges til at forbinde printpladen til AD-Converteren.

For at sikre systemet mest muligt mod støj stabiliseres signalet med afkoblingskondensatorer. De ses henholdsvis på strømforsyning, 5V og -5V samt på forstærker, subtractor og filter. Afkoblingskondensatorer er placeret så tæt på som muligt.

2.6.1.2 Ultiboard

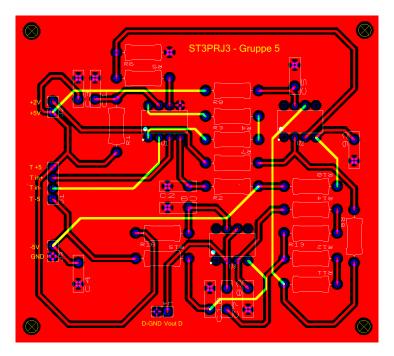

Figur 2.6. Design af printplade i Ultiboard

På 2.6 ses kredsløbet fra Multisim overført til Ultiboard. Forstærker og subtractor er placeret øverst på pladen hvorimod filteret er placeret nederst på pladen. Mocstande og kondensatorer er placeret så tæt som muligt for at gøre det mere organiseret og overskueligt at kigge på. Strømforsyning, stelforbindelse og indgang til transducer er placeret til venstre på pladen. Udgangen til AD-Converteren ses nedest på pladen.

2.6.2 Test af printplade


2.6.2.1 Multisim

Til at teste kredsløbet for eventuelle fejl i opbygningen realiseres diagrammet i Multisim.

INDSÆT TEKST OG BILLEDE HÉR


2.6.2.2 Ultiboard

For at være sikker på, at printpladen er opbygget i Ultiboard uden fejl kan der udføres forskellige tests inde i programmet. Det tjekkes visuelt, at at forbindelser mellem komponenterne er lavet og der derfor ikke er nogle overskydende ratsnest tilbage. Disse ratsnests er de gule linjer, der viser forbindelserne mellem komponenterne før forbindelserne er tegnet.

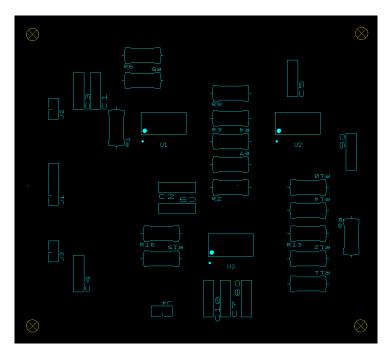

Figur 2.7. Test af printplade: Ratsnests

Ud over at teste for manglende forbindelser mellem komponenter kan man lave lignende tests, der henholdsvis tester nets for fejl og mangler samt en overordnet test, der tester for fejl. Disse tests ses på figurerne nedenfor.

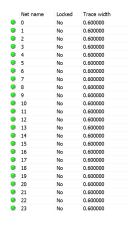

Figur 2.8. Test af printplade: Nets

Ultiboard - 20. november 2018, 12:39:49

DRC and netlist check [Blodtrykmålesystem1] - 20. november 2018, 13:03:19 Completed; 0 error(s), 0 warning(s), 0 filtered error(s); Time: 0:00.50


Figur 2.9. Test af printplade: Fejl

2.6.3 EuroCircuits

Før printpladen bestilles laves en sidste test, der tester for, om printpladen kan laves. Denne test er udført på EuroCircuits hjemmeside.



Figur 2.10. Test af printplade: Nets

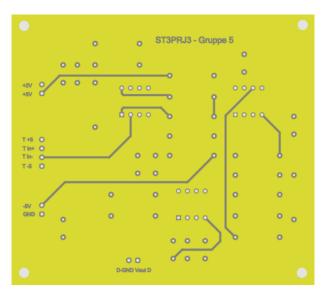

Figur 2.11. Test af printplade: Fejl